

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ультразвуковая мойка для чистки зубных протезов и бижутерии Cleaner BS-D04 230мл, черная



СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности	3
2. Об устройстве	3
3. Использование	3
4. Использование	4
5. Обслуживание	5
6. Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества	7
Товар ненадлежащего качества	7

1. Техника безопасности

- Не позволяйте детям использовать устройство, это может привести к ожогам или поражению электрическим током;
- Людям с установленным кардиостимулятором запрещено использовать устройство;
- Не включайте устройство без воды в резервуаре;
- Не добавляйте легковоспламеняющиеся жидкости;
- Попадание воды внутрь корпуса может вызвать короткое замыкание, пожар или поломку;
- Не используйте устройство во влажных помещениях;
- Не прикасайтесь к электрическим разъёмам металлическими предметами;
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство самостоятельно;
- Не используйте адаптеры, не предназначенные специально для данного устройства;
- Не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками, особенно при её подключении или отключении;
- Отключайте питание, если устройство не используется длительное время;
- Не очищайте жемчуг и другие изделия с низкой твёрдостью поверхности;
- Не мойте кольца и ожерелья с драгоценными камнями и бриллиантами длительное время;
- Не используйте одно и то же электрическое гнездо с телевизором, радиоприёмником или компьютером.

2. Об устройстве



Нажмите на кнопку «Time» чтобы выбрать продолжительность работы: 180, 280, 380, 480 или 600 секунд. Очиститель автоматически остановится после окончания выбранного времени (S). Когда обратный отсчёт завершён, отображается «000», а экран выключается через 3 секунды.


3. Использование

Шаг 1: Поместите предмет и налейте воду в резервуар, не превышая отметку «MAX». (Допускается использование одной очищающей таблетки.)




Не запускайте устройство без воды.

Шаг 2: Закройте крышку и подключите питание.

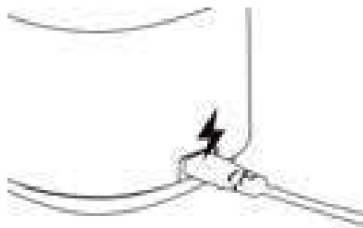


Шаг 3: Нажмите кнопку «Time».
Выберите необходимое время.

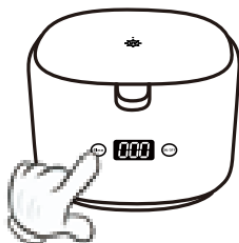

Шаг 4: Нажмите кнопку «ON/OFF», чтобы запустить устройство.



Шаг 5: Когда загорается синий индикатор, это означает, что работает УФ-лампа.
При открытии крышки УФ-лампа автоматически выключается.

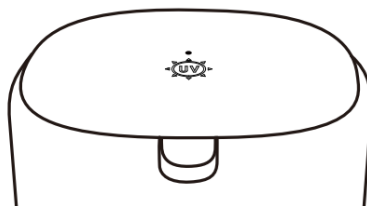

Шаг 6: По завершении работы отключите питание, откройте крышку, извлеките предмет и вылейте загрязнённую воду с той стороны, где нет металлических контактов.
Очистите и вытрите резервуар.



4. Использование

Быстрая очистка – 180 секунд

Быстро удаляет налёт и остатки с зубных щёток.

Ежедневная очистка – 280 секунд

Идеально подходит для очищения кистей для макияжа и других щёток.

Лёгкая очистка – 380 секунд

Хорошо подходит для деликатной очистки колец, цепочек и другой бижутерии.

Средняя очистка – 480 секунд

Оптимальна для тщательной очистки часов и ремешков.

Глубокая очистка – 600 секунд

Предназначена для сильно загрязнённых зубных протезов, кап и т.п.,

Рекомендуется использовать с очищающими таблетками.

Полное удаление зубного камня, зубной восковой плёнки, жёлтого налёта, чёрных пятен и налёта от курения может быть невозможным.

Фиксированные элементы в зубных протезах (например, седативы) могут не поддаваться очистке.

Обесцвечивание и ржавчина на металлах и драгоценных металлах не удаляются.

Очистка украшений с приклеенными элементами, таких как бриллиантовые кольца и ожерелья, может привести к их отклеиванию и потере.

Можно использовать чистящие средства или таблетки.

Если вы очищаете изделие ежедневно, достаточно использовать только воду.


Если изделие не очищалось долгое время, рекомендуется применять чистящие средства для повышения эффективности.

Чтобы продлить срок службы изделий, не рекомендуется использовать чистящие средства слишком часто.

5. Обслуживание

Налейте воду в резервуар с помощью мерного стакана — до половины от стандартной отметки. После промывки мягкой губкой ополосните резервуар чистой водой.

Будьте осторожны, чтобы вода не попала в зону питания на дне резервуара и на контактные точки крышки.

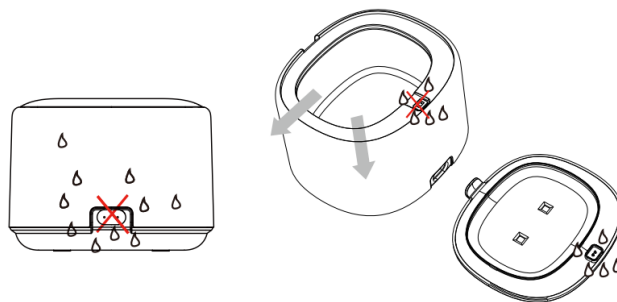


После очистки обязательно ополосните предметы чистой водой ещё раз.

Не допускайте попадания воды в разъёмы питания при ополаскивании.

Если пятна трудно удалить, смочите чистую ткань водой и аккуратно протрите загрязнённые участки.

После протирки тщательно высушите устройство сухой тканью.

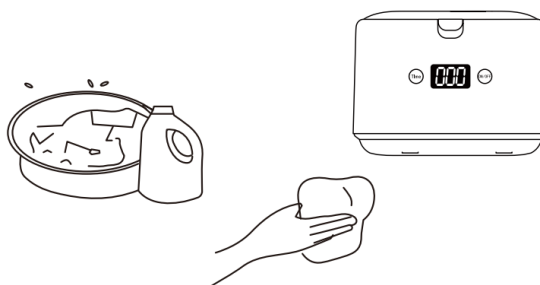

6. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;

- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;

- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!