

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ультразвуковая мойка для чистки зубных протезов и бижутерии Cleaner BS-D04 230мл, черная



СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности	3
2. Об устройстве.....	3
3. Использование.....	3
4. Использование.....	4
5. Обслуживание	5

1. Техника безопасности

- Не позволяйте детям использовать устройство, это может привести к ожогам или поражению электрическим током;
- Людям с установленным кардиостимулятором запрещено использовать устройство;
- Не включайте устройство без воды в резервуаре;
- Не добавляйте легковоспламеняющиеся жидкости;
- Попадание воды внутрь корпуса может вызвать короткое замыкание, пожар или поломку;
- Не используйте устройство во влажных помещениях;
- Не прикасайтесь к электрическим разъёмам металлическими предметами;
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство самостоятельно;
- Не используйте адаптеры, не предназначенные специально для данного устройства;
- Не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками, особенно при её подключении или отключении;
- Отключайте питание, если устройство не используется длительное время;
- Не очищайте жемчуг и другие изделия с низкой твёрдостью поверхности;
- Не мойте кольца и ожерелья с драгоценными камнями и бриллиантами длительное время;
- Не используйте одно и то же электрическое гнездо с телевизором, радиоприёмником или компьютером.

2. Об устройстве




Нажмите на кнопку «Time» чтобы выбрать продолжительность работы: 180, 280, 380, 480 или 600 секунд. Очиститель автоматически остановится после окончания выбранного времени (5). Когда обратный отсчёт завершён, отображается «000», а экран выключается через 3 секунды.

3. Использование

Шаг 1: Поместите предмет и налейте воду в резервуар, не превышая отметку «MAX». (Допускается использование одной очищающей таблетки.)



Не запускайте устройство без воды.
Шаг 2: Закройте крышку и подключите питание.

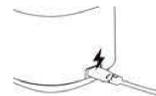

Шаг 3: Нажмите кнопку «Time». Выберите необходимое время.



Шаг 4: Нажмите кнопку «ON/OFF», чтобы запустить устройство.



Шаг 5: Когда загорается синий индикатор, это означает, что работает УФ-лампа. При открытии крышки УФ-лампа автоматически выключается.



Шаг 6: По завершении работы отключите питание, откройте крышку, извлеките предмет и вылейте загрязнённую воду с той стороны, где нет металлических контактов. Очистите и вытрите резервуар.

4. Использование

- Быстрая очистка – 180 секунд
- Быстро удаляет налёт и остатки с зубных щёток.
- Ежедневная очистка – 280 секунд
- Идеально подходит для очищения кистей для макияжа и других щёток.
- Лёгкая очистка – 380 секунд
- Хорошо подходит для деликатной очистки колец, цепочек и другой бижутерии.
- Средняя очистка – 480 секунд
- Оптимальна для тщательной очистки часов и ремешков.
- Глубокая очистка – 600 секунд
- Предназначена для сильно загрязнённых зубных протезов, кап и т.п., Рекомендуется использовать с очищающими таблетками.

Полное удаление зубного камня, зубной восковой плёнки, жёлтого налёта, чёрных пятен и налёта от курения может быть невозможным.
Фиксированные элементы в зубных протезах (например, седативы) могут не поддаваться очистке.
Обесцвечивание и ржавчина на металлах и драгоценных металлах не удаляются.
Очистка украшений с приклеенными элементами, таких как бриллиантовые кольца и ожерелья, может привести к их отклеиванию и потере.

Можно использовать чистящие средства или таблетки.

Если вы очищаете изделие ежедневно, достаточно использовать только воду.


Если изделие не очищалось долгое время, рекомендуется применять чистящие средства для повышения эффективности.

Чтобы продлить срок службы изделий, не рекомендуется использовать чистящие средства слишком часто.

5. Обслуживание

Налейте воду в резервуар с помощью мерного стакана — до половины от стандартной отметки. После промывки мягкой губкой ополосните резервуар чистой водой.

Будьте осторожны, чтобы вода не попала в зону питания на дне резервуара и на контактные точки крышки.

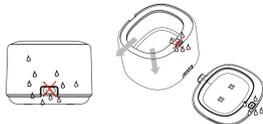

После очистки обязательно ополосните предметы чистой водой ещё раз.

Не допускайте попадания воды в разъемы питания при ополаскивании.

Если пятка трудно удалить, смочите чистую ткань водой и аккуратно протрите загрязнённые участки.

После протирки тщательно высушите устройство сухой тканью.



Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара,

свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!